

## Instructiuni utilizare termometru digital medical




### Caracteristici

- Afisaj LCD 3 1/2 digiti
- Autotestare automata imediat dupa pornire
- Semnal sonor la sfarsitul masuratorii
- Inchiderea automata pentru economisirea bateriei
- Cap de masura flexibil
- Indicare a iesirii din gama de masurare
- Gama de masura: 32...42 grade Celsius
- Timp de masurare: 30...60 secunde
- Rezolutie: 0,1 grade Celsius
- Memorare ultima masuratoare
- Aprox. 100 ore de functionare cu o baterie
- Alimentare: baterie 1 x AG3 1,5 V tip buton (inclusa)

### Instructiuni de utilizare

- Porniti termometrul prin apasarea pe buton. Un semnal sonor se aude pentru confirmarea pornirii.
- Plasati capul flexibil al termometrului in zona masurata.
- Dupa trecerea unei perioade de 30...60 secunde, termometrul semnaleaza sfarsitul masuratorii printr-un sir de semnale sonore (beep-uri).
- Valoarea masurata este memorata si poate fi citita pe display-ul LCD.
- Inchideti aparatul prin apasarea pe buton.
- In cazul in care nu se actioneaza butonul de oprire timp de 10 secunde, termometrul emite un sir de semnale sonore si apoi se stinge automat.

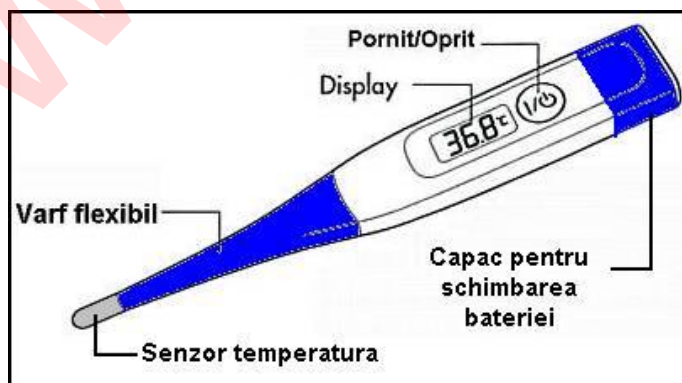

### Note

1. Pastrati termometrul in cutia de plastic transarent furnizata la cumparare.
2. Inainte de depozitare in cutie, stergeti termometrul cu o carpa curata.
3. La descarcarea bateriei inlocuiti-o cu una de tip AG3, SG3, LR41, 192/384/392, LR736, SR736.



Suport tehnic: [www.DigitalWorld.ro](http://www.DigitalWorld.ro), Tel. 021-410.01.37